

音波電動歯ブラシ

[パロ ソニック]

paro[®]sonic ご利用ガイド

ver.1.0.0

この度はパロソニックをご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に当ガイドをお読みいただき、安全にご使用ください。



paro[®]sonic [パロ ソニック]



専用サイト



amazon
購入ページ



Instagram

セット内容



- ①本体 ②ソフトクリーンブラシ ③デュオクリーンブラシ ④歯間ブラシ(4本)
- ⑤歯間ブラシホルダー+タフトブラシ ⑥充電器(USB Type-A) ⑦トラベルケース

本体詳細



モードとブラシヘッド

パロソニックはブラッシングしたい部位や状態に合わせて選べる3種類のモードと、適したブラシヘッドを組み合わせることで、より効果的なブラッシングが可能です。

モード

① センシティブモード

デリケートな部分のブラッシングに特化したモードです。ダメージを受けやすい歯肉や歯と歯茎の境目のブラッシングに適しています。

振動 40,000回/分 タイマー 2分

② インテンシブモード

磨きたい部分に集中して、しっかりブラッシングできるモードです。特に条件を絞ることなく、歯全体への使用に適しています。

振動 35,000回/分 タイマー 3分

③ 歯間ブラシモード

歯間部や矯正装置のすき間など、磨きにくい部分に特化したモードです。また、インプラントのメンテナンスにも適しています。

振動 12,000回/分 タイマー なし

タイマー…アシストタイマー機能。詳細は裏面をご確認ください。

ブラシヘッド

ソフトクリーンブラシ

推奨モード ① センシティブモード

優しく磨くだけでなく、汚れもしっかり落とせるよう細く長い毛を使用し、細部にまで入り込んで磨けるのが特徴です。歯肉の腫れや、歯周病の治療後のメンテナンスに適したブラシです。



デュオクリーンブラシ

推奨モード ② インテンシブモード

歯肉に優しく、なおかつしっかり磨けるように、細く長い毛と先端が丸い毛を組み合わせています。虫歯や歯肉炎予防に効果的なブラシで、普段使いに適しています。



タフトブラシ

推奨モード ① センシティブモード

パワフルな振動で磨き残しが多く出る部分を集中的に綺麗にします。インプラントの清掃や矯正治療中の方にもおすすめです。



歯間ブラシ

使用モード ③ 歯間ブラシモード


歯の状態や個人差に合わせて選べる歯間ブラシです。振動によりワイヤーを通す回数が減るため、歯肉への負担を軽減できます。
※必ず歯間ブラシモードでお使いください。



基本の使い方


① ブラシを本体に取り付ける

ブラシの正面と本体の正面を合わせ、カチッと音がするまで真っすぐ差し込みます。

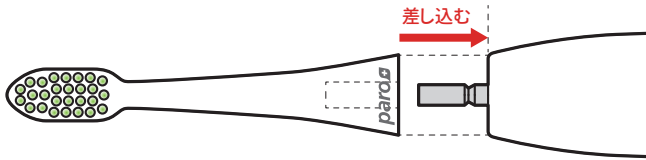


② 上ボタンを押して電源を入れる

お口の中にブラシを入れ、上ボタンを押して電源を入れます。

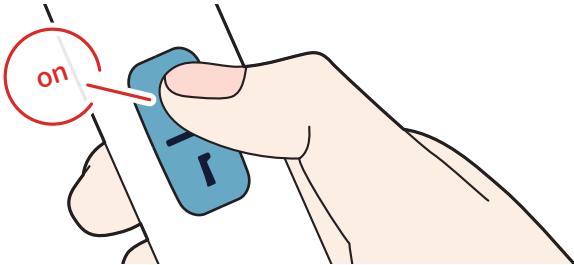

■モードの切り替え

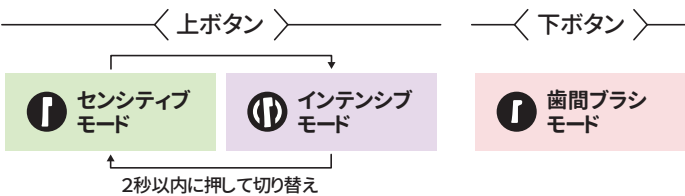

- ・センシティブモード・インテンシブモードの切り替えは、電源を入れた後、2秒以内に上ボタンを押してください。(選択されたモードのランプが点灯します)
- ・ボタンを押して2秒後に再度ボタンを押すと電源が切れます。
- ・電源が切れた状態で上ボタンを押すと、前回使用したモードからスタートします。
- ・歯間ブラシモードは、電源が切れた状態で下ボタンを押すとスタートします。

③ ブラシを歯に当てて動かす


毛先を歯に軽く当てて、奥歯から歯列に沿ってゆっくりブラシを移動させます。

■磨く手順

口の中を4分割(上下左右)とし、1ブロックを下記の手順で歯列に沿ってブラシを移動させ、アシストタイマー*でお知らせするまで磨きます。


- 1 歯の噛み合わせの面
- 2 歯の表面
- 3 歯の裏面

残り3ブロックも同じように磨きます。

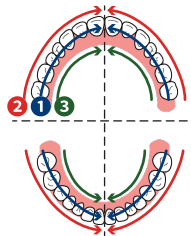

〈アシストタイマーとは?〉

動作中に一瞬振動が止まり、磨く時間の目安をお知らせする機能です。

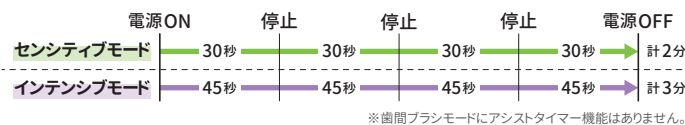

■ブラシの交換時期について

ソフトクリーン・デュオクリーンブラシ 2~3ヶ月を目安にお考えください。パロニックのブラシは優しい磨き心地ですが、ゴシゴシと磨くタイプのものではないのでブラシが傷みにくいのが特徴です。そのため、2ヶ月過ぎて毛先が広がっていても衛生面を考慮、それ以上のご利用はお控えください。
タフトブラシ 毛先が広がったり、毛が抜けましたら交換してください。
歯間ブラシ 毛先が広がったり、針金が劣化しましたら交換してください。


■トラベルロックついて

下ボタンを4秒間押すと本体下部の4つのランプが同時に4回点滅してロックが起動します。解除する場合も起動と同様に下ボタンを4秒間押します。また、本体を充電器に接続すると自動的に解除されます。

■製品の保証について

製品の保証期間は「ご購入日から1年間」となります。ただし、不適切な使用や、通常の使用下で発生するブラシヘッドの摩耗や傷、その他微小な不具合については保証の対象とはなりません。また、ハウジングが開けられている場合も保証の対象外となります。発送の際には保証書を同封し、本製品一式を弊社までご返送ください。

■ブラシの当て方

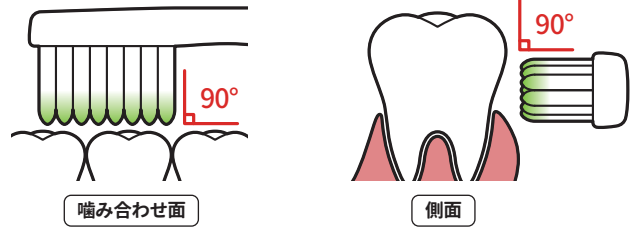

噛み合わせの面と歯の側面は、ブラシの角度を90°にして当てます。



前歯の裏面は、歯の角度に沿って縦に当てます。

歯と歯茎の境目は、ブラシの毛先が歯周ポケットに入るように角度45°で当てます。

〈ポイント〉

- ・ブラシは毛先が軽く触れる程度に当てましょう。
- ・ブラシの移動はゆっくり行いましょう。

■歯と歯の間のケア方法

必要に応じ、歯間ブラシで歯間部や矯正ワイヤー、インプラントのケアを行ってください。(必ず歯間ブラシモードでお使いください) 歯間部のケアは同一方向または反対方向にて、2回歯間ブラシを通してください。



パロニックには別売品も含め8種類の歯間ブラシがあり、歯の状態や個人差に合わせて適切なものをお選びいただけます。詳細は提携医院*までお問い合わせください。

*提携医院一覧は下記QRコードよりご確認ください。

〈タフトブラシ・歯間ブラシの脱着方法〉

タフトブラシ、歯間ブラシは歯間ブラシホルダーに装着して使用します。



④ 振動が止まるまでブラッシングをする

センシティブモードはスタートから2分、インテンシブモードは3分で自動で電源が切れます。振動中に電源を切りたい場合はボタンを押してください。歯間ブラシモードはタイマー機能がなく、ブラッシングが終了したらボタンを押して電源をお切りください。

お問合せ先 販売業者

DCI
DENTALEAD

株式会社 デンタリード

本社/大阪市淀川区新高1-1-15

東京営業所/東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス2F

TEL: 06(6396)4448

フリーFAX: 0120(24)0892

TEL: 03(5217)0353 FAX: 03(5217)0366

24時間 おやくに